

LiquiBand® Exceed™ XS

Für eine gleichmäßige, einheitliche Wundabdeckung

						
BARRIERE GEGEN MIKROORGANISMEN	60 SEKUNDEN POLYMERISATIONSDAUER	STARK UND SICHER	EINZIGARTIGE SPITZE	HOHE VISKOSITÄT	LAGERUNG BEI RAUMTEMPERATUR	HERGESTELLT IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

✓ TECHNOLOGIE FÜR VERSTOPFUNGSFREIE ANWENDUNG

- ▶ Verstopfungsfreie Spitze für einen gleichmäßigen Kleberfluss
- ▶ 0,4g Kleber pro Applikator zum Verschließen von Wunden bis etwa 7 cm Länge

✓ BENUTZERFREUNDLICHER APPLIKATOR

- ▶ Flügelapplikator für sichere und einfache Aktivierung
- ▶ Kontrolliertes Auftragen des Klebers



✓ EINZIGARTIGE APPLIKATORSPITZE

- ▶ Durch die elliptische Form der Applikationsspitze ist ein schmales oder breites Auftragen des Klebers möglich
- ▶ Die innovative Applikationsspitze stellt eine gleichmäßige und verstopfungsfreie Anwendung sicher

✓ REINE OCTYL-FORMEL

- ▶ Optimiert für Haltbarkeit und Flexibilität
- ▶ Sorgt für hohe Viskosität
- ▶ Erzeugt engen Hautkontakt
- ▶ Kein „brennen“ beim Einsatz

LiquiBand® Exceed™ Sortiment

Kombiniert die verbesserten Eigenschaften Präzision und kontrolliertes Auftragen mit den zusätzlichen Vorteilen eines neuen Spitzen-Designs.

LiquiBand® Exceed™ XS

- ▶ Ergibt 7 cm Länge
- ▶ Verstopfungsfreie Spitze
- ▶ Ideal für kleine Inzisionen und Laparoskopie-Zugänge





LiquiBand® Exceed™

- ▶ Ergibt 30 cm Länge
- ▶ 90 Minuten lang intraoperative Wiederverwendung
- ▶ Ideal für mittlere bis lange chirurgische Inzisionen



Wichtigste Vorteile

- ✓ **Hohe Viskosität**¹
 - ▶ Optimale Flexibilität
- ✓ **Kontrollierte Applikation**²
 - ▶ Applikator-Design für exaktes Auftragen
- ✓ **Barriere gegen Mikroorganismen**³
 - ▶ Schutzfilm gegen grampositive und gramnegative Bakterien sowie Pilze. Nachgewiesene Wirksamkeit gegen S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, Candida albicans und MRSA
- ✓ **Formel für verstopfungsfreie Anwendung**⁴
 - ▶ Anwender können in ihrer eigenen Geschwindigkeit arbeiten
 - ▶ Der Klebstoff bleibt während des gesamten Wundheilungsprozesses intakt
- ✓ **Wundverschluss während des gesamten Heilungsprozesses**⁵
 - ▶ Der Kleber haftet 5 – 10 Tage auf der Haut und löst sich dann auf natürliche Weise ab

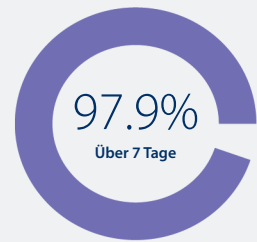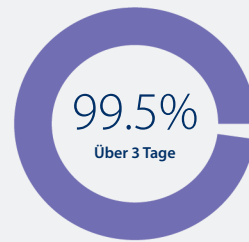

Schutz gegen:

Grampositive Bakterien

- ▶ S. epidermidis
- ▶ S. aureus & MRSE

Gramnegative Bakterien

- ▶ Ps. aeruginosa
- ▶ E. coli
- ▶ E. cloacae

Pilze

- ▶ Asp. brasiliensis (niger)
- ▶ C. albicans

LiquiBand® Exceed™ XS

Größe	Menge pro Box	REF.	PZN
0,4g	10	72014024	15206233

LiquiBand® Exceed™

Größe	Menge pro Box	REF.	PZN
0,8g	6	72014002	13541654